

第一次開機就上手-前門篇

By 郁勝

到前門時先打卡



跟大門警衛拿鑰匙



獲得鑰匙一把



到遠東提款機右邊的教室拿器材(電扇*1、筆電*2、腳架*2、紙箱*3)




先拿電扇及腳架出來，腳架擺在地上的三個膠帶上，再拿其他器材出來，拿完記得鎖門



先裝熱像儀(紅圈處拉開，儀器放上去後，放開有扣起來就好)




電源(小黑)先接上去，接上就開機了

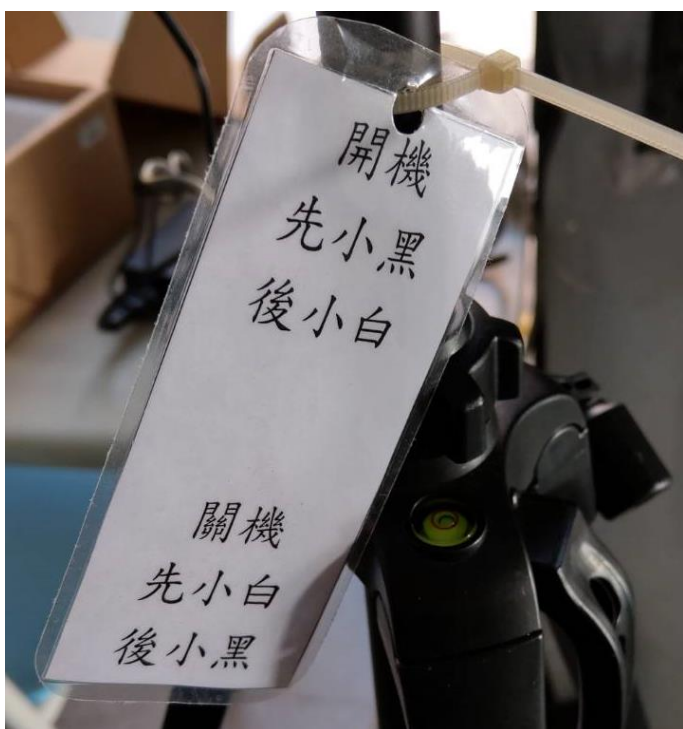


記得把鏡頭拿下來(手指夾起就可以了，請不要去轉它)




接好一台的電源後，再先去接另一台的電源(記得開延長線的電源)

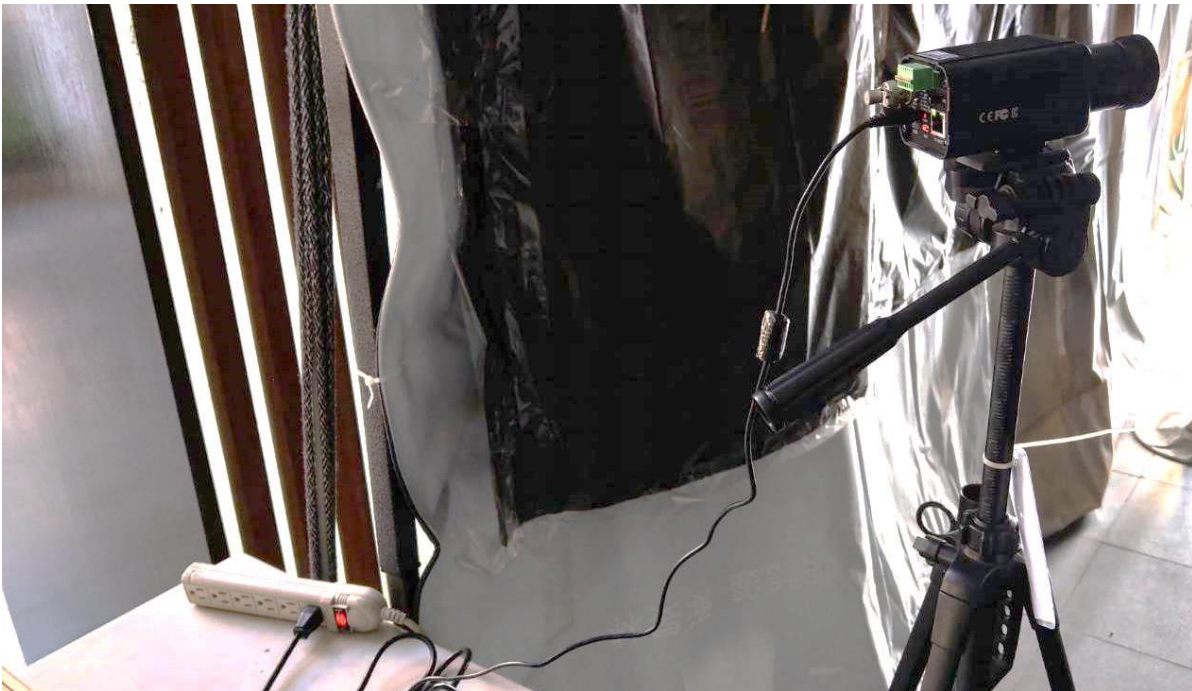


兩台的電源都接好後，電腦開機、把傳輸線(小白)接好

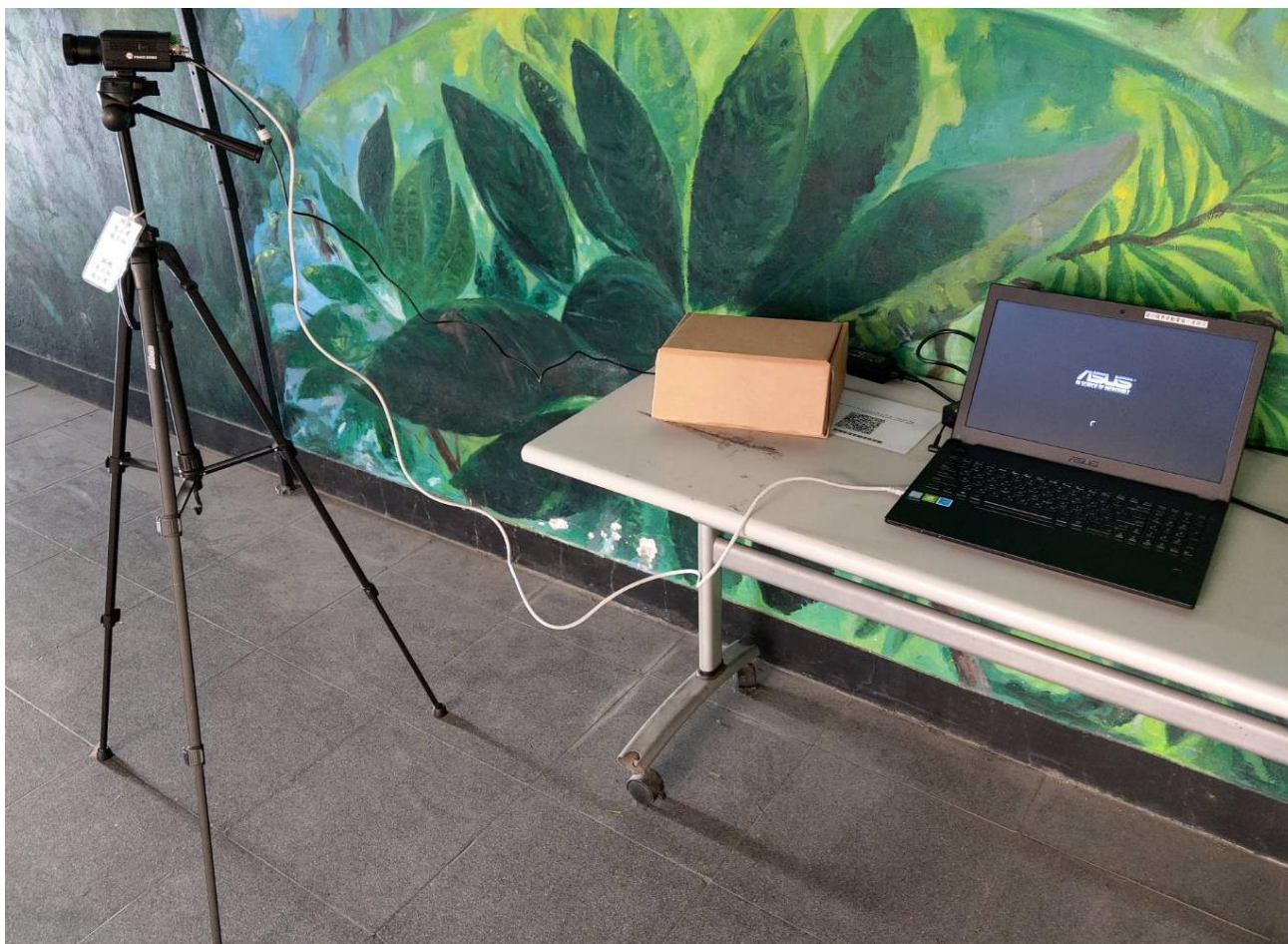


一台電腦是衛保組的有滑鼠、有密碼 255。另一台沒密碼沒滑鼠

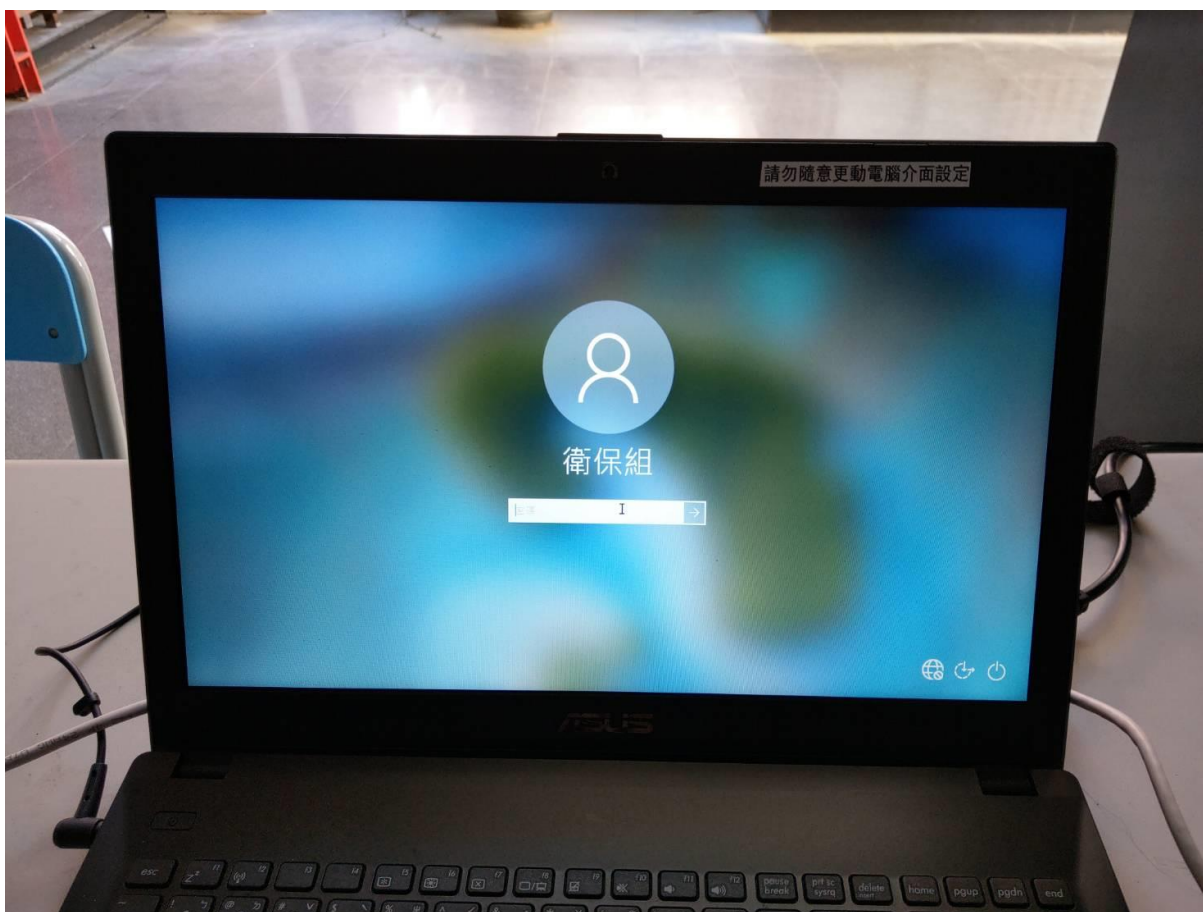


開機後，電腦桌面中間有個圖示(紅圈處)，別懷疑，點它兩下啟動它
啟動後會跳幾個小視窗出來，按 enter 或點確定就可以了

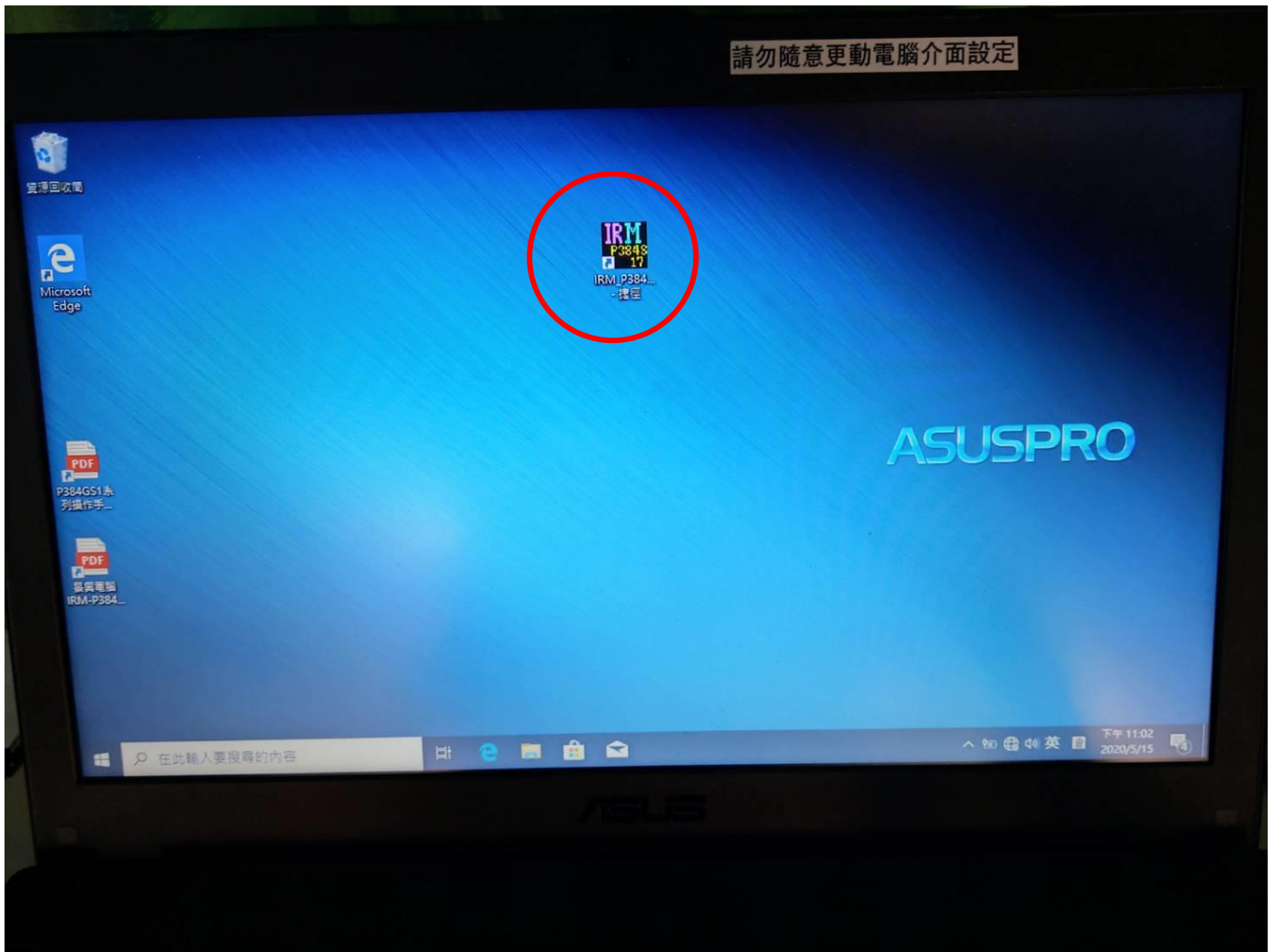

進入程式後，點左上角的”熱影像溫度監控”

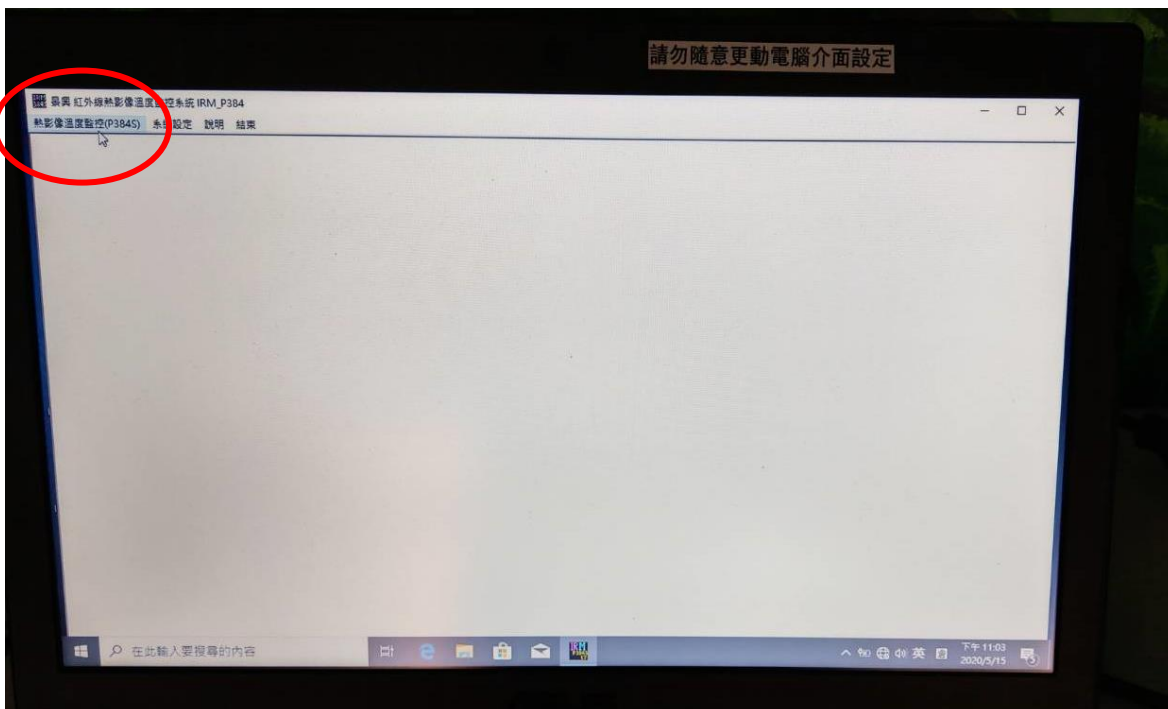

是否讀取上次的各項設定條件----請按”是”

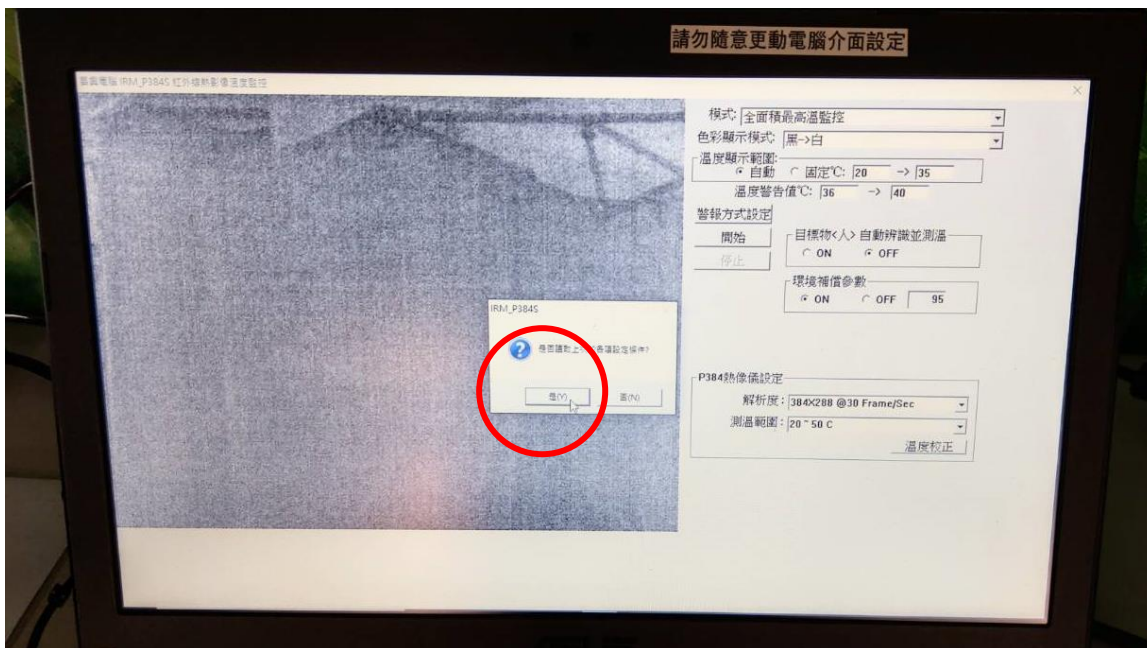


再按”開始”

然後看左下角最高溫是否跟目前氣溫差不多

人再走過去看儀器測出來的體溫跟額/耳溫槍量出來的差不多，都差不多就 ok 了

若儀器顯示的溫度較高，可以先按停止，過幾分後再按開始(天氣較熱時可能要等久一點)

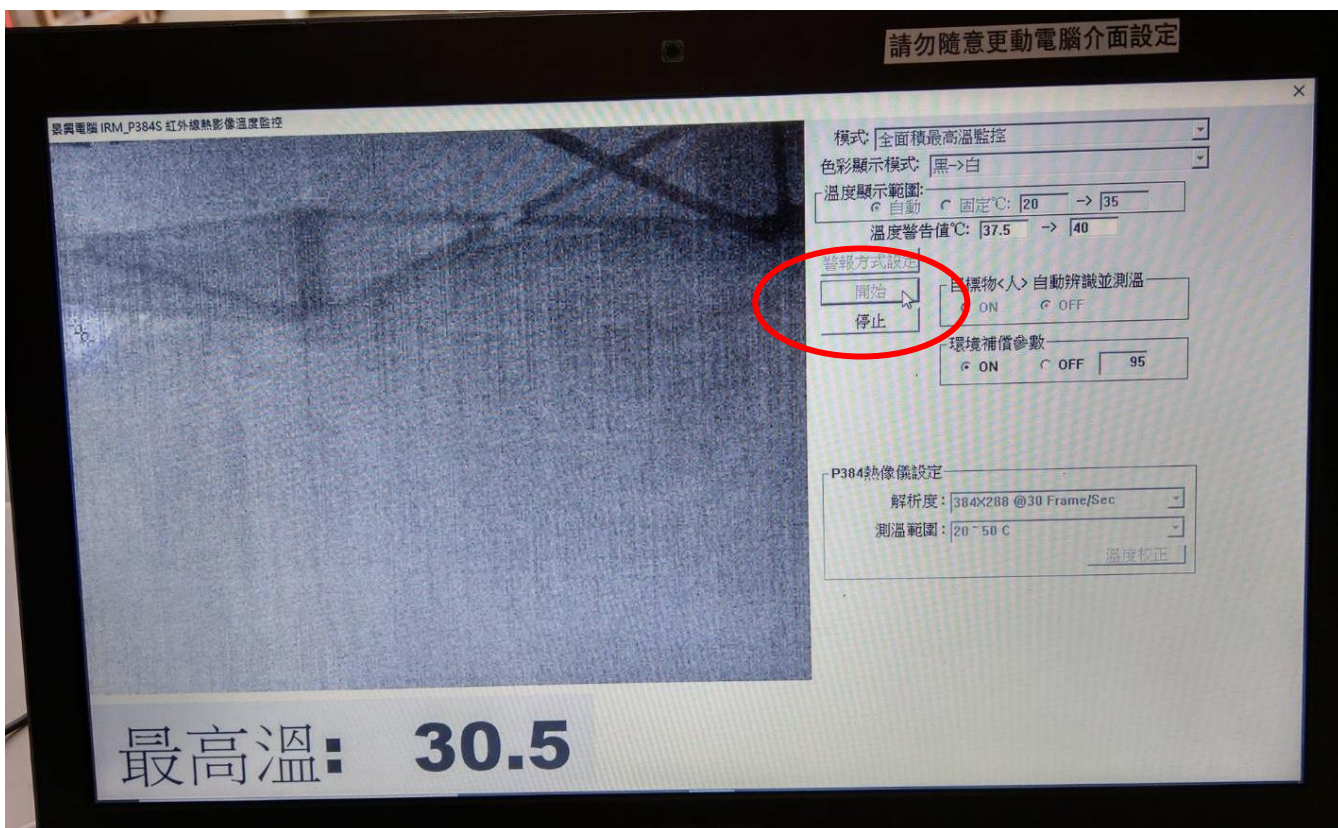

完成圖


記得用毛巾把鍵盤蓋好蓋滿

把額/耳溫槍拿出來，放垃圾袋



備註 1

非衛保組的電腦會顯示防毒保護已過期，按確認後視窗就會不見了

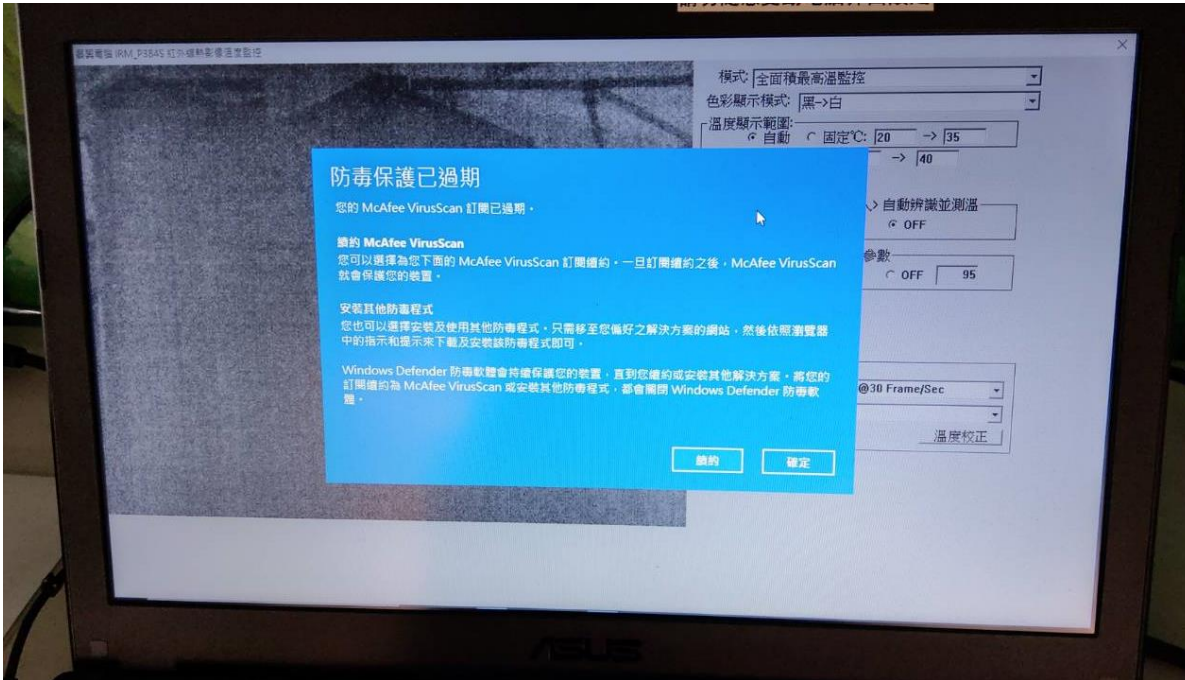

備註 2

前門兩台熱像儀，之前都會一台正常(或稍低)，另一台高 1 - 4 度有反應過了，但目前似乎無解(5/15 有人來調過，但變氣溫正常，體溫偏低 2 度左右) 所以可以先開跟額溫槍量出來體溫較接近的那台的通道，人多時再開另一個通道

如果熱像儀量出來的體溫有誤差，可以看差幾度，以及螢幕顯示高溫在哪，再看是否幫學生量體溫
Ex.自己額溫槍量 36 度，但熱像儀顯示 35 度，那經過的學生可能就都要加個一度；學生經過熱像儀都顯示體溫都過高時，可以注意如果是額頭、脖子，這兩個要再用額溫槍量體溫，但如果是頭髮、衣服、背包、食物等就不用。